



Radiation Measurement

株式会社パーキンエルマー・ジャパン


FOR CLEANER AIR,
WATER AND SOIL

食品中の放射線測定


WIZARD²™
ガンマカウンター




2480 WIZARD²

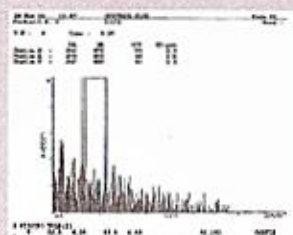


バックグラウンド

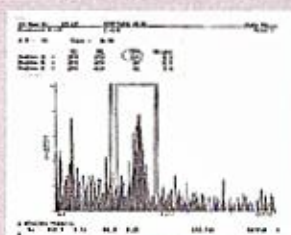

2. レタス 2011/3/27

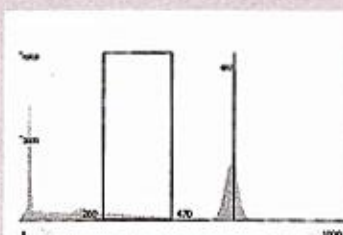

Cs137 スタンダード

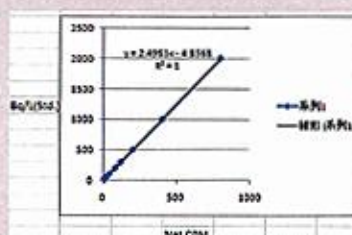

測定上の特徴

- ガンマ線測定装置
- 3インチNaI検出器使用
- MCA内蔵により核種スペクトル表示が可能
- 取扱いが簡単 (20ccテフロンコーティングバイアルに液体・固体サンプルを入れるだけ)
- 270本の自動サンプル測定が可能
- 標準測定時間：10分/1サンプル

装置仕様：1190 (W) × 680 (H) × 650 (D)
重量：325kg
電源：115V 50/60Hz

株式会社パーキンエルマー・ジャパン
www.perkinelmer.co.jp


PerkinElmer
For the Better